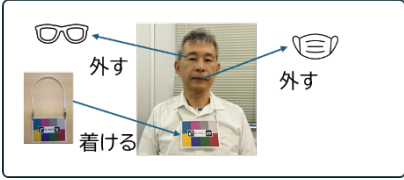
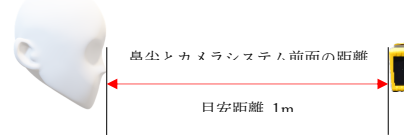
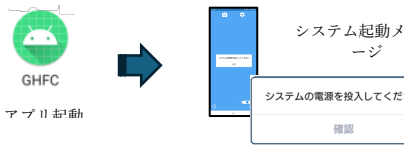
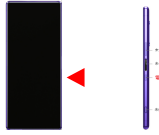
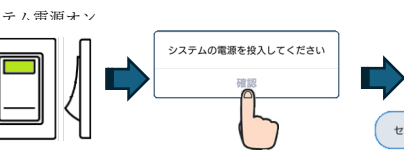

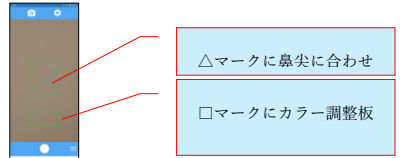
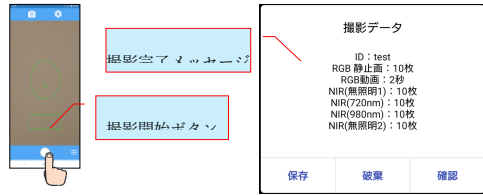

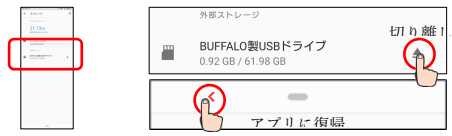



簡易録音手順書

操作手順	操作内容	操 作	補 足
機器の準備 (立ち上げ)	マイクとレコーダー の接続		マイクはL側に強く差し込む
	レコーダー電源オン		2 アクション
録 音	録音一時停止		赤の点滅状態が一時停止
	録音開始		赤が点きっぱなしが録音中
	医療従事者	日にち、録音場所、被験者番号を録音	口元にマイクを持って録音
	マイクの取り付け		カラー板の中心に取り付ける
	被験者	ばたか、ばたか、ばたか、ばたか、ばたか (5回) 2 Set	なるべく早く
	被験者	あ〜 2 Set	なるべく長く
	録音終了		赤が消えたら録音終了
機器終了 (立ち下げ)	電源オフ		マイクは銀色のボタンを強く押して、 本体から引き抜く

簡易録画手順書

操作手順	操作内容	操 作	補 足
被験者準備	マスクと眼鏡を外す 被験者番号を確認し首に着ける		
撮影距離確認	撮影対象者との距離確認		1m の距離に設置します
機器の準備 (立ち上げ)	Android 端末 電源投入とアプリ起動		Android 端末の電源投入 
	カメラシステム 電源投入		1) 電源オン後、【確認】ボタンが選択(押下)可能になります。 2) セットアップ完了まで一定の待ち時間があります。 3) セットアップ完了後、システム ID が表示され、撮影モードに移行します。
撮影	患者 ID の設定		既に登録済の ID は、プルダウンメニューで選択が可能です
	撮影 ① 撮影対象者左右調整		カラー調整板は、配置枠ないであれば問題ありません
	撮影 ② 実際の撮影と完了		撮影は以下の順に実行されます。 1) RGB 静止画撮影 2) RGB 動画撮影 3) NIR 無照明 撮影 4) NIR 720nm 照明 撮影 5) NIR 980nm 照明 撮影 6) NIR 無照明 撮影
保存	保存		保存前に【確認】の選択により撮影データの簡易的な確認が可能
メモリクローズ	USB メモリ切り離し		必ず USB メモリの切り離しを実施しアプリケーションに復帰してください。
アプリケーション 終了	終了		アプリケーションを終了し、セット電源をオフ後、スマホをオフしてください。